

Malmö sjukhusområde: Så skickar du prover i gul patron med insats eller i point-to-point

De flesta prover kan skickas i gul rörpostpatron eller med point-to-point. Provrören transporteras automatiskt direkt till rätt analysinstrument. Använd i första hand point-to-point eller gul patron i rörpost när du skickar prover.

Innan du skickar provet, kontrollera att:

- Analysbeställningen är digital i eLAB RS.
- Provtagningen är bekräftad i eLAB RS.
- Provet har en etikett med läsbar streckkod.
- Etiketten sitter lodrätt, rakt och i samma höjd som på bilden.
- Provröret har rund botten.



Gul rörpostpatron



- Placera provrör i de små hålen. Du kan stapla flera provrör i samma hål.
- Inget får sticka upp utanför insatsen.
- Det stora hålet är enbart till för blododlingsflaskor - max 2 flaskor per patron.
- Lägg inget annat i stora hålet!
- Stäng locket.
- Skicka till **snabbval *1 – Lab Provinlämning**
Laboratoriemedicin Bas.

Point-to-point (Tempus)

- Skicka provrör med botten först.
- Avvakta grönt ljus innan du matar in ett provrör.



Malmö sjukhusområde:

Transportsätt för prover som inte kan skickas i gul patron eller point-to-point

Prover som ska till Provinlämning Laboratoriemedicin Bas - snabbval *1

Provtyp	Röd patron (provplastpåse med gummiband runt)	Gul patron (eLAB digital beställning)	Blå patron (Transfusions-medicin)	Manuell transport (Internttransport)
Prov med pappersremiss	JA	nej	nej	
Provrör med flat botten	JA	nej	nej	
Quantiferonrör	JA	nej	nej	
Prover med transporthylsa	JA	nej	nej	
Udda vätskor: Pleura, ascites, bukdrän m.m.	JA	nej	nej	
Kapillära prov	JA	nej	nej	
Provrör över 16 mm i diameter	JA	nej	nej	
Studieprover	JA	nej	nej	
Vävnadsprov i formalin	JA	nej	nej	
Blododlingsflaskor	Ja, men helst →	JA	nej	
Csv (Likvor)	nej	nej	nej	JA
Blodgaser i spruta	nej	nej	nej	JA
Aspirin effekt	nej	nej	nej	JA
P2Y12-hämning	nej	nej	nej	JA
Prov på is eller i vattenbad	nej	nej	nej	JA

Prover som ska till Transfusionsmedicin – snabbval *2

Provtyp	Röd patron (provplastpåse med gummiband runt)	Gul patron (eLAB digital beställning)	Blå patron (Transfusions-medicin)	Manuell transport (Internttransport)
• Blodgruppering • Förenlighetsprovning • Transplantation	JA	nej	nej	
Blodprodukter	nej	nej	JA	

Kontakt

- Laboratoriemedicin bas/Provinlämning dygnet runt: 040-33 14 32
- Transfusionsmedicin dygnet runt: 040-33 13 95
- Klinisk patologi dagtid vardag: 040-33 14 02
- Beställningscentral internttransport dygnet runt: 046-275 29 00

Malmö sjukhusområde: Så skickar du prover i röd patron

1. Packa prover och remisser i plastpåse med fyra fack – skicka max åtta provrör per påse.
 - Lägg pappersremiss i det stora facket. Vik inte remissen.
 - Du kan lägga större provbehållare i den stora fickan för remisser.
 - Grön transportburk: lägg remiss i plastpåse inne i burken.
2. Vik ner locket på plastpåsen ordentligt.
3. Rulla ihop påsen och fäst ett gummiband mitt på plastpåsen.
4. Placera plastpåsen i rörpostpatronen.
5. Packa max en påse per patron. Överfulla patroner och påsar utan gummiband orsakar driftstopp!
6. Stäng locket på patronen innan du skickar.




Transporthylsor och provrörspåse

Använd transporthylsa om det står i Analysportalen att det behövs.



1

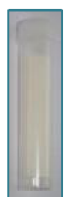

2



3



4



5

Exempel där transporthylsa behövs: Sputumburk (1), kapillära prover (2), Faeces på burk (3), provflaska TB 200mL (4), objektglas (5).

Plastpåsarnas artikelnummer i Marknadsplatsen är 6039062.

Malmö sjukhusområde: Så skickar du patologiprover i rörpost

1. Packa prov och remiss i plastpåse med fyra fack (art. 6039062).
Lägg remiss i det stora facket utan att vika den. Lägg provburkar i de små facken. Se max antal per fack och påse i matrisen:

Provburk		Antal burkar per fack	Antal burkar per påse
Provburk med gul kork 45x40 ml. Beställ via Marknadsplatsen art. 31654.		1 provburk i vartannat fack.	Totalt 2 provburkar: 
Provburk med gul kork 45x10 ml. Beställ via Marknadsplatsen art. 31653.		3 provburkar per fack.	Totalt 12 burkar: 
Provburk med vit kork 20x10 ml. Beställ via Marknadsplatsen art. 31643		3 provburkar per fack.	
Provbehållare för frys. Beställ via Marknadsplatsen art. 25048 för burk, 25049 för lock.		3 provburkar per fack.	

2. Rulla ihop påsen till smalt paket och fäst med gummiband mitt på plastpåsen.
3. Lägg den ihoprullade påsen i ytterligare en plastpåse (art. 29869) och knyt ihop, som på bild till höger.
4. Placera plastpåsen i röd rörpostpatron. Max en påse per patron.



Skickar du flera påsar kan du lägga remiss i första patronen.
Skicka resterande patroner direkt efter.

För färskta prover/frys – ring patologilabb på **040-33 14 96** och kontrollera att rörposten är i drift innan du skickar.

Malmö sjukhusområde: Skicka blodprodukter i blå patron

Transfusionsmedicin kan skicka de vanligaste blodprodukterna (erytrocyter, plasma och trombocyter) till er via rörpost.

För transport av blodprodukter används blå patroner. Skicka alltid tillbaka den blå patronen (snabbval *2) så fort du tömt den eftersom det inte finns så många blå patroner. Använd den aldrig för att skicka något annat.



Retur av blodprodukter till Transfusionsmedicin:

1. Ring Transfusionsmedicin på **040-33 13 95**. Be om att få en blå patron om du vill skicka tillbaka blodprodukter.
2. Lägg blodprodukten i en ren plastpåse, exempelvis en fryspåse. Förslut ordentligt med gummiband. Använd inte provrörspåsar – dessa kan vara kontaminerade med smitta.
3. Skriv RETUR, datum, tid för retur och din signatur på blodprodukts följesedel. Detta är för att säkerställa spårbarhet.
4. Blodprodukter som förvaras vid samma temperatur kan skickas tillsammans:
 - Erytrocyter och plasma kan transporteras i samma patron.
 - Trombocyter transporteras för sig då de ska skyddas från kyla.
5. Skicka till **snabbval *2 - Transfusionsmedicin**. (Gör inte en hemsändning!)



Skicka inte i rörpost:

- Fler än fyra blodprodukter som ska skickas samtidigt.
- Specialprodukter, exempelvis utbytesblod.
- Stora mängder plasma, till exempel Octaplas vid plasmabytte.
- Blodprodukter som har gått sönder eller är kopplat med transfusionsaggregat.

Beställ manuell transport på telefon 046-275 29 00.

Blodprodukter kan returneras dygnet runt, men helst vardagar mellan klockan 8–16.

Undrar du något? Ring Transfusionsmedicin och fråga: 040-33 13 95.