Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-10-21

Transport av prover i rörpost och point-to-point

DokumentID 22769974
Dokumentnamn Transport av prover i rörpost och point-to-point

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

Innehåll

1 Rörpostpatron utan insats 3
2 Rörpostpatron med insats i Lund 5
3 Rörpostpatron med insats i Malmö och Helsingborg 6
4 Point-to-point 7
5 Blodprodukter i rörpost 8

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

1 Rörpostpatron utan insats

1. Packa prover och remisser tillsammans i avsedd plastpåse. Art.6039062

2. Rulla ihop påsen till ett smalt paket och fäst ett gummiband mitt på plastpåsen.

3. Placera plastpåsen i rörpostpatronen.

4. Packa endast **en** påse med prov-behållare per patron och/eller max 2 blododlingsflaskor. Överfulla rörpostpatroner orsakar **driftstopp!**


5. Stäng båda locken före transport.







Patronerna ser olika ut på respektive ort men packning sker på samma sätt.

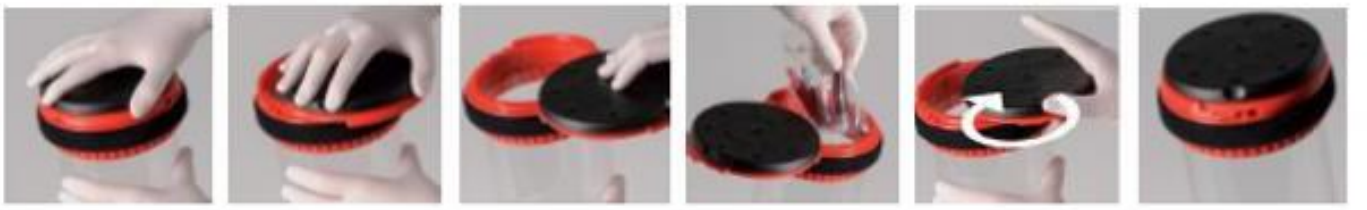

Packa prov i plastpåse med fack:

- Vid ett fåtal rör läggs dessa i fickan i mitten.
- Max två blododlingsflaskor i varje påse.
- Om provbehållaren inte får plats i en liten ficka läggs provet i den stora fickan för remisser.
- Om provet packas i grön transportburk, läggs remiss i plastpåse inne i burken.
- Plastpåsar beställs via Marknadsplatsen art.6039062



Använd transporthylsa, enligt anvisning i Analysportalen:

1. Sputumburk
2. Kapillära prover i transporthylsa
3. Faeces på burk
4. Endast till prov**flaska** TB 200mL
5. Objektglas

1



2



3 4 5



Tänk på att

- Om beställning gjorts på pappersremiss, ska remiss läggas i det stora facket
- Vik inte remissen
- Vik ner ”locket” på plastpåsen ordentligt
- Rulla ihop påsen från kortsidan och omslut med gummiband



Skicka INTE följande prov med rörpost

- Likvor
- Blodgaser i spruta
- Aspirin effekt
- P2Y12-hämning
- Prov på is eller i vattenbad

2 Rörpostpatron med insats i Lund





- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet packas i patronen.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i rörpostpatron med insats:
  - Rör med flat botten
  - Quantiferonrör



  - Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
  - Kapillära prov och blodgas-sprutor
  - Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt och rakt.
- Adressera till Laboratoriemedicin Bas, Station 1.
- Patron med insats beställs via Weblord, ange enhet och rörpoststationsnummer vid beställning.

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

3 Rörpostpatron med insats i Malmö och Helsingborg







- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet packas i patronen.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i rörpostpatron med insats:
  - Rör med flat botten
  - Quantiferonrör

NEJ!



  - Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
  - Kapillära prov och blodgas-sprutor
  - Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt och rakt.
- Det stora hålet är enbart till för blododlingsflaskor.
- Adressera till 114030 provmottagning Laboratoriemedicin Bas (snabbval *1).
- Patron med insats beställs via Weblord, ange enhet och rörpoststationsnummer vid beställning.

4 Point-to-point

- Beställningen ska vara digital, i eLAB RS. Observera att provtagningen måste vara **bekräftad** i eLAB RS innan provet matas in i sändenheten.
- Endast för provrör med **rund** botten.
- Dessa rör får **inte** skickas i point-to-point (P2P):
  - Rör med flat botten
  - Quantiferonrör

NEJ!



  - Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
  - Kapillära prov och blodgas-sprutor
  - Rör över 16 mm i diameter
- Korken på rören får aldrig ha varit avtagen.
- Etiketten ska sitta lodrätt, rakt och i samma höjd som på bilden.
- Provrör skickas med botten först. Avvakta grönt ljus.





5 Blodprodukter i rörpost



Vid transport av blodprodukter används **blå** patroner. Dessa är reserverade för Transfusionsmedicin och skall skickas tillbaka så snart som möjligt då antalet är begränsat. Inga prover eller dylikt får skickas i dessa patroner då blodprodukter skall försvara i en ren miljö.

Prover till Transfusionsmedicin skickas i röd patron utan insats.

Blodprodukter från avdelningar till Transfusionsmedicin

- Kontakta Transfusionsmedicin och be om att få en **blå patron** skickad till er för returnering av blodprodukter.
  De blå patronerna är reserverade för Transfusionsmedicin och antalet är begränsade. Därför skall de alltid tillbaka till Transfusionsmedicin så snart som möjligt och får inte ”sparas” för framtida bruk.

- Lägg blodprodukten i en **ren** plastpåse, t.ex. fryspåse, som försluts ordentligt, med knut eller gummiband.
  *Använd **INTE** provrörspåsar – dessa återanvänds och kan därför vara kontaminerade med smitta från provrör.*

- Skriv RETUR, datum, tid för retur och signatur på blodproduktens följesedel och skicka tillbaka den **blå patronen** med blodprodukt till Transfusionsmedicin.
  Detta är för att säkerställa spårbarhet för hur länge produkten befunnit sig i rörpostsystemet.

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

- Blodprodukter som förvaras vid samma temperatur kan skickas tillsammans.
  Erytrocyter och plasma kan transporteras i samma patron. Trombocyter transporteras för sig eftersom de ska skyddas från kyla.



*Korrekt packad blodprodukt i en **ren** plastpåse (i detta fall en fryspåse) och ordentligt försluten.*



Blodprodukt packad i påse avsedd att skicka provrör i.

- Max 4 st. blodprodukter får returneras med rörposten.
  Om fler än 4 st. blodprodukter ska returneras vid samma tillfälle måste flera patroner användas eller transporteras med manuell transport till Transfusionsmedicin ske.

- Blodprodukter kan returneras dygnet runt, men p.g.a. bemanning på Transfusionsmedicin bör det helst ske vardagar mellan kl. 8 – 16.

Transfusionsmedicin kan skicka de vanligaste blodprodukterna i rörpost

- Erytrocyter
- Plasma
- Trombocyter

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

Blodkomponenter som INTE skickas med rörpost

- Special produkter, exempelvis tvättablod eller utbytesblod
- Stora mängder plasma, t.ex. Octaplas vid plasmabyte
- Blodprodukt med kopplat transfusionsaggregat eller som har gått sönder.

Vid osäkerhet; ring Transfusionsmedicin på respektive ort och fråga innan ni skickar blodprodukten.

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.