

Labombudsträff

Hösten 2025

Agenda

- Presentation Laboratoriemedicins kundgrupp
- Presentation av deltagare från eLAB RS förvaltningsgrupp
- eLAB RS
- Packa prov i rörpost och point-to-point (Tempus)
- Packa prov för transport från primärvården

Laboratoriemedicins kundgrupp

Ansvarar för

- Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
- Analysportalen
- Nyheter inom Laboratoriemedicin
- Nyhetsbrev till Labombud
- labmedicin@skane.se

eLAB förvaltningsgrupp

Representanter från olika verksamhetsområden inom laboratoriemedicin samt representanter från labteknik, kundgruppen och utvecklingsteam på IT/MT.

Ansvarar för

- Underhåll och utveckling
- Support och felsökning
- Samarbete med integrerade system

ELAB RS

Digitala analysbeställningar till laboratorierna

- Nya arbetssätt
 - Digitala beställningar - istället för pappersremisser
 - Skriv ut en eLAB-etikett istället för en pappersremiss + etikett till provröret
 - Signera provtagning samt anger provtagningstid digitalt - istället för att skriva på pappersremiss
 - Skicka in endast proverna till laboratorierna - istället för både prov + pappersremiss
 - Det är en stor omställning, både hos er som lägger beställningar och tar prover och hos oss på laboratorierna som tar emot beställningarna och proverna och detta kräver att vi hittar nya arbetssätt. Det tar tid och känns nytt i början.
 - Ta gärna hjälp av andra som kommit igång med digitala beställningar i eLAB.
 - Laboratoriemedicin kan också vara behjälpliga med att förmedla kontakter.

Digitala analysbeställningar till laboratorierna

På Vårdgivare Skåne informerar vi när vi lägger till nya analyser.

Nuvarande analysutbud

- 90% av kemiska analyser
- 100% av immunologiska analyser
- 80% av mikrobiologiska analyser

[eLAB RS - digitala beställningar till laboratorier - Vårdgivare Skåne](#)

Beställning i eLAB

- Flera analyser har lite annorlunda namn i eLAB jämfört med på pappersremissen. Vi arbetar med att se till att det är samma namn i eLAB, Analysportalen och pappersremisserna för att förenkla för er. Analysnamnen i eLAB är samma som i SDV.
- Lägg upp de vanligaste analyserna ni beställer på er enhet som favoriter. (Görs av er enhetsadministratör).
- I rutan för "Meddelande till provtagning" kan man tex skriva viktig information om provet inte ska tas på sin egen enhet så som om provet måste tas ett visst datum, eller info om ex "månadskontroll april". Här kan man också lägga in var provet ska tas, ex ben, arm osv.
- Tilläggsinfo – viktig info för resp beställning.

Sök	Bläddra	Favoriter	Senaste	Allmänremiss
☐ U-odling ^	☐ Mikrobiologi PV ^	☐ Serologi/Virologi PV ^	☐ blodgas ^	☐ inskrivning ^
☐ Odling, Urin	☐ B pertussis DNA, Nasofary	☐ Borrelia antikroppar, Serum	☐ Basöverskott, Ecv-	☐ Järn, P-, TIBC, P-
	☐ Klamydia, Gonokocker, Re	☐ EBV antikroppar, Serum	☐ (PNA) Blodgas, B-	☐ TSH, P-
	☐ Klamydia, Gonokocker, Sv	☐ Gastroenteritpanel virus, F	☐ (PNA, mobil) Blodgas, B-	☐ CRP P-
	☐ Klamydia, Gonokocker, Ur	☐ Hepatit A screening (anti-H		
	☐ Klamydia, Gonokocker, Va	☐ Hepatit B screening (HBsA		
	☐ Clostridioides difficile, Fae	☐ Hepatit C ny (anti-HCV), S		
	☐ Cryptosporidium, Oocystor mikros	☐ Herpes simplex HSV DNA,		
	☐ Protozoer och maskäggn m	☐ Luftvägsvirus, Nasofary		
	☐ Gastroenteritpanel bakteri	☐ Screening HIV, Serum		
	☐ Fusio, Arcano DNA, Svalg	☐ TB-spec antigen (Quantite		

Etiketter till eLAB

Etiketterna kommer även att gälla för SDV.


- Etikett Lab/provtagning bordsskrivare Zebra 52x28mm 2358 etiketter/rulle
Artnr i Marknadsplatsen: 31659
- Etikett Lab/provtagning bärbar skrivare Zebra 52x28mm 590 etiketter/rulle
Artnr i Marknadsplatsen: 31660

Privata vårdgivare, som inte kommer åt Marknadsplatsen, beställer etiketter via OneMeds Webshop. Vid frågor kontakta OneMeds kundsupport. Utseendet på etiketterna ser annorlunda ut från Privat vårdgivare

Läs mer

[Beställ förbrukningsmaterial - Vårdgivare Skåne](#)

[eLAB RS - digitala beställningar till laboratorier - Vårdgivare Skåne](#)

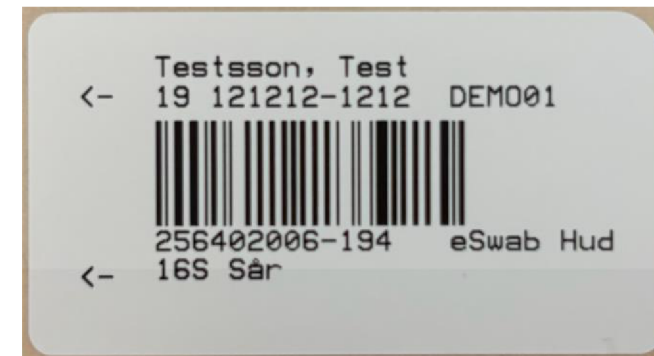

Provtagning i eLAB

- Extra etikett får endast skrivas ut när provet ska skickas i en ytterhylsa. Samma etikett får aldrig sättas på flera rör!
Undantag: Kapillär provtagning, allergi, diff-utstryk
- Bekräfta provtagning efter genomförd provtagning.
- Egenprovtagning/ provtagning som utförs i hemmet tex urinprov/faeces måste också bekräftas i eLAB. Justera tiden för när provet togs av patienten och bekräfta provtagningen.

Läs mer: [eLAB RS – manualer och rutiner - Vårdgivare Skåne](#)

Bevakning av obekräftad provtagning

I webbversionen av eLAB finns funktionen "Bevakning". Där syns prover som har fått etikett utskriven men inte bekräftats provtagna de senaste 24 timmarna.

Kommer inte upp när man går från Melior eller PMO via uthopp eftersom man då endast kommer in på den patientens beställningar/provtagningar.

Kontrollera regelbundet.

SKÅNE

Bevakning

Namn: Katrin W

Visar samtliga icke provtagna delbeställningar där etiketter skrivits ut inom de senaste 24 timmarna på din inloggade enhet.

ID	Personnummer	Utskriftstid	Utskriven av (RSID)
Ingen information			

Admin

Beställning

Provtagning

Labbtjänster

Bevakning

Hjälp

REGION SKÅNE

Nya funktioner

Version 1.14

- PMO-beställningar går att redigera i eLAB
- Kundkod följer med i uthopp från Melior/PMO vid beställning
- Provtagning kan anges högst 2 månader tillbaka i tiden
- Möjlighet att redigera beställarinfo på beställningar
- Etiketter utseende har justerats

Version 1.15

- Ny visuell flagga vid viktigt meddelande till provtagare från beställare
- Bekräftelse krävs för att ha tagit del av viktig information vid provtagning
- Utskriftshistorik för etikettutskrifter finns för alla beställningar
- Information om utförande provtagare finns i labvyn (Medicinsk service)

Framtida utveckling i eLAB

- Beställningar kommer att bli tillgängliga via Mina planer, som används inom kommunala vårdverksamheter.
- Sortiment inom patologi och genetik kommer att bli beställningsbart under 2026.
- Sortiment avseende transfusion och transplantation kommer inte att bli tillgängliga i eLAB RS men kommer att ingå i SDV.

Kommunikation

Kontaktvägar support

- Vid förbättringsförslag, idéer, frågor av mer allmän karaktär eller andra ärenden som inte kräver omedelbar åtgärd så kan man kontakta eLAB förvaltningsgrupp via labmedicin.
- För tekniska supportärende och upplägg av nya enheter/admin kontakta 30 000/ServiceDesk.
- Om man arbetar i PMO eller Melior ska man in första hand vända sig till respektive support.

Informationsvägar till kunder

- Aktuell information uppdateras på Vårdgivare Skåne
- Labombudens nyhetsbrev
- Användarmanualen anpassas efter varje uppgradering

[eLAB RS – support och kontakt - Vårdgivare Skåne](#)

Packa prov i rörpost och point-to-point (Tempus)

Packningsinstruktion - Patron utan insats



- Prov och remiss packas i avsedd plastficka.
- Rulla ihop till smalt paket.
- Hålls ihop med gummiband.

Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)

Packningsinstruktion – Patron med insats



- Prov beställda i eLAB skickas i dessa patroner med insats.
- Blododlingar som är beställda i eLAB skickas med gul patron i Malmö.

Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)

Packningsinstruktion – Blå patron



- Blå patron endast för blodkomponenter.
- Returneras omedelbart.
- Trasiga påsar eller påsar med kopplat aggregat får ej skickas i rörpost.

Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)

Rörpostpatron med insats eller point to point

Korken på rören får aldrig ha varit avtagen
Endast för provrör med rund botten

Dessa rör får inte skickas i rörpostpatron med insats:

- Rör med flat botten
- Quantiferonrör
- Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
- Kapillära prov och blodgas-sprutor
- Rör över 16 mm i diameter



Packa prov för transport från primärvården

Prov till Transfusionsmedicin och transplantation

Nyhet

Alla prover till transfusionsmedicin och transplantation ska numera packas i transporthylsa och i vadderat kuvert tillsammans med remiss. Märk ytterförpackning med Transfusionsmedicin/KIT samt ort till närmsta akutsjukhus.

Läs mer

[Ändring av packningsinstruktioner för transfusionsmedicin - Vårdgivare Skåne](#)

Ändring av packningsinstruktioner för prover till transfusionsmedicin

Till dig som beställer analyser för transfusion och transplantationsimmunologi.

Packningsinstruktion Turkos låda



Låda 1 Närmsta akutsjukhus

- Digitala beställningar: eLAB RS enligt tabell sida 2*.
- Beställningar på pappersremiss: Rutin/akut, Special 3, Special Malmö, samt det som skickas till externa lab.
- **Adressvred:** Välj 1 och närmsta akutsjukhus (HG, KD, LU, MA, YS).

Låda 2 Laboriemedicin Lund

- Övriga digitala beställningar som inte står i tabell på sida 2* samt övriga beställningar på pappersremisser.
- **Adressvred:** Välj 2 och Lund (LU).

Tänk på!

- Beställ i första hand i eLAB!
- Turkost kuvert märks tydligt med 1 eller 2 samt avsändare och mottagare.
- Inga prov/föremål får läggas löst i lådan.
- Kontrollera att transportlådor som kommer i retur till din enhet är tomma.



Tänk på!



- Transportlådan ska alltid innehålla 4 lådinsatser som går att vända. Ena sidan för rör, andra sidan för övriga provbehållare.
- Kapillära prover packas i transporthylsa i lådinsatsen.
- Ingen aluminiumfolie eller gummiband runt rören.
- Rör och burkar som inte passar i insatsen packas som Enstaka prov.

Läs mer

[Transport av prover utanför sjukhusområdet](#)

Bilirubin

- Ljusskydda provet direkt efter genomförd provtagning i tex aluminiumfolie
- Centrifugera provet
- Ta bort folie och placera röret i turkos transportlåda tillsammans med kylklamp. Stäng locket ordentligt. En låda med stängt lock skyddar mot ljus
- Om provet inte skickas samma dag, eller behöver stå i kyl inför nästa transport, förvaras det i kylskåp insvept i aluminiumfolie.

P- Bilirubin										
Info		Provtagningsmaterial								
Akcrediterad:		PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)								
Beställning:	Digital, Rutin/Akut									
Svarstid:	Akut och Dagligen	<table><thead><tr><th>Rörvolym</th><th>Blodvolym</th><th>Tillsats</th><th>Art. Nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 mL</td><td>3 mL</td><td>Li-heparin och gel</td><td>15402</td></tr></tbody></table>	Rörvolym	Blodvolym	Tillsats	Art. Nr	5 mL	3 mL	Li-heparin och gel	15402
Rörvolym	Blodvolym	Tillsats	Art. Nr							
5 mL	3 mL	Li-heparin och gel	15402							
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.										
Provtagning										
PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).										
Provtagning Neonatal										
Provhantering, förvaring och transport										
Bilirubin är mycket ljuskänsligt. Skydda provet från både dagsljus och inomhusbelysning. Inomhusbelysning kan redan efter några timmar ge ett falskt lågt resultat.										
Vänligen avlägsna ljusskyddet från prov som skickas i transportlåda. Transportlåda med stängt lock fungerar utmärkt som ljusskydd.										

Koagulationsanalyser

- Endast PK beställt
Skicka röret i turkos transportlåda
- Flera koagulationsanalyser
Centrifugera och pipettera av plasman till nytt plaströr inom 4 timmar. Frys provet. Skicka som fryst prov. Pk behöver då inte tas separat utan analyseras på det provet som skickas fryst.

P- D-dimer (FEU)																		
Info		Provtagningsmaterial																
Ackrediterad:		Citratrör (ljusblå kork)																
Beställning:	Digital, Rutin/Akut																	
Svarstid:	Akut och Dagligen																	
		<table><thead><tr><th>Rörvolym</th><th>Blodvolym</th><th>Tillsats</th><th>Art. Nr</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>5 mL</td><td>2,7 mL</td><td>Na-citrat</td><td>2561</td><td>Första hands val</td></tr><tr><td>5 mL</td><td>1,8 mL</td><td>Na-citrat</td><td>7538</td><td>Endast för barnprovtagning</td></tr></tbody></table>	Rörvolym	Blodvolym	Tillsats	Art. Nr		5 mL	2,7 mL	Na-citrat	2561	Första hands val	5 mL	1,8 mL	Na-citrat	7538	Endast för barnprovtagning	
Rörvolym	Blodvolym	Tillsats	Art. Nr															
5 mL	2,7 mL	Na-citrat	2561	Första hands val														
5 mL	1,8 mL	Na-citrat	7538	Endast för barnprovtagning														
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagg.																		
Provtagning																		
Citratrör (plasma, ljusblå kork). Fylls helt och vänds minst 5 gånger direkt efter provtagningen. Analysen utförs ej kapillärt.																		
Provtagning Neonatal																		
Provhantering, förvaring och transport																		
Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Förvaring i rumstemperatur. Om prov inte kan analyseras inom 4 timmar pipettera av plasman till nytt tomt plaströr och frys vid -20 °C.																		
Prov taget utanför sjukhuset ska skickas fryst eftersom transport och hanteringstid kan överstiga 4 tim. Frysta prover skickas i avsedd behållare till laboratoriet.																		

Avhållda rör

CENTRIFUGRÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

Sterilt. PP. Rund botten.

ART NR LEV ART NR


27514 60.550.109 7 ml, 82x13 mm



Dessa rör kan nu skickas i den turkosa transportlådan utan transporthylsa

Mer information

- [Laboratoriemedicin - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/laboratoriemedicin)
- Labhandboken
- Preamalytik [Lärportalen \(skane.se\)](https://www.skane.se/larportalen)
- [eLAB Vårdgivare Skåne](https://www.skane.se/elab)
- labmedicin@skane.se
- Analysportalen [AnalysPortalen - Labmedicin Skåne](https://www.skane.se/analysportalen)

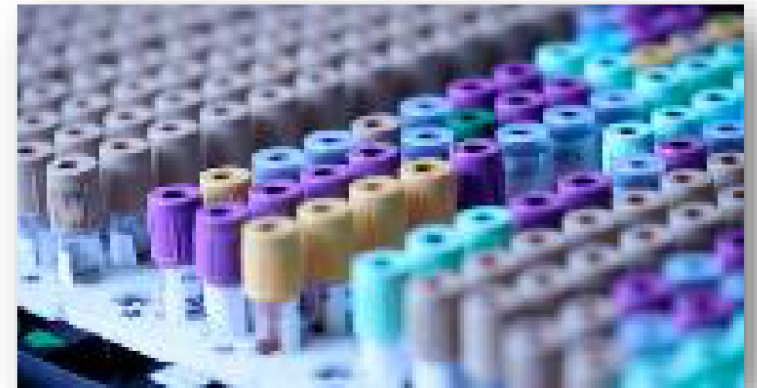

Tack för idag!

labmedicin@skane.se