Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-05-18

Kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM)

DokumentID 88405185
Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller Glukos DM (HemoCue)
Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.

Kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM)



Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8˚ C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8˚ C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller Glukos (HemoCue 201 DM)

Serienummer på instrument




Lotnummer kontrollösning



Gräns för godkänd intern kontroll

Lotnummer kuvett

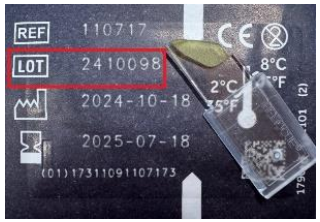

Reagens (kuvett): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i 2–8° C (kyl).

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 1 Lotnummer på intern kontrollösning: 24560

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 1 månad efter öppningsdatum Förvaring: 2–8° C (kyl)

Datum	Lotnummer reagens (kuvett)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur
250814	230196B	2,9 ± 0,8	2,9	1,8	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	230196B	2,9 ± 0,8	2,9	2,6	Ja		XX