

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2025-12-08




Likvorprov – praktisk handledning

Analysortiment och fullständiga anvisningar finns i Analysportalen.

Likvorprov – praktisk handledning finns under Råd & Stöd.

www.skane.se/labmedicin

Provtagningsmateriel

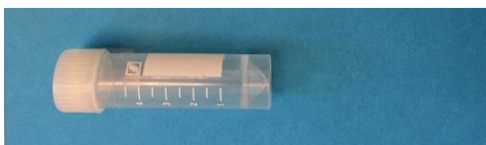

Sterila plaströr av polypropen, **art nr 25188**, kort 5 mL rör med transparent kork. Används för kliniskt kemiska- och patologi/cytologi-analyser samt till biobank mm.



Sterila plaströr av polystyren, **art nr 30606**, långt 10 mL rör med gul kork. Används till mikrobiologiska analyser.



Transfixrör Nordic Biosite, **art nr TF-CSF-5**, 5 mL rör med orange kork. Används till hematopatologiska analyser.




CSF False bottomrör, low binding, 2,5 mL rör med klarblå kork. Sarstedt ref.nr 63.614.625. Används till Alzheimermarkörer

Märkning av rör

- Används eLAB, märk röret med eLAB etikett
- Används remiss med streckkodsetiketter ska rören märkas med remissens etiketter
- Övriga rör märks med streckkodsetikett som innehåller uppgifter om namn och personnummer, provtagningsdatum och tid samt provmaterial

Märk rören så att det framgår i vilken ordning de har tagits.

Rörordning

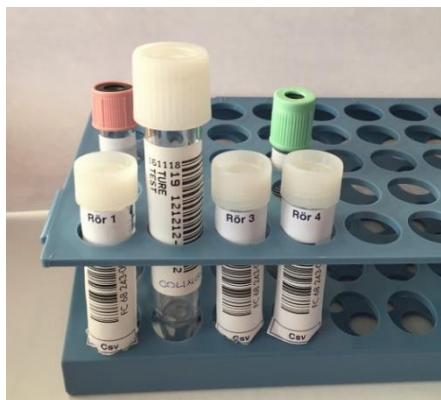

Så här skall det se ut då samtliga likvoranalyser för de fyra första rören är beställda. För de flesta frågeställningar krävs utöver rören på bilden ett eller flera extra rör.

Önskas inte samtliga analyser för de fyra första rören kan en eller flera av dessa portioner användas för önskad analys med rekommenderat rör under Extra rör i tabellen.

Rör för celler och spektrofotometri kan inte flyttas utan skall följa angiven rörordning, dvs rör 3 och 4.

Transport och förvaring

Rörpost får inte användas.

Transportera rören i rumstemperatur till närmsta Laboratoriemedicin Bas inom 30 minuter.

Prover för cytologisk undersökning transporteras direkt till laboratorium för Klinisk patologi Lund inom 60 minuter. Ring 046-17 34 14 för meddelande att prov är på väg. Prover förvaras i kylskåp vid eventuell väntan på transport. Prover tillhanda laboratoriet för analys mån-fre kl 08.00-15.30 (utförs ej helgdagar).

Portion/ Rör nr	Analyser på respektiverör	Remiss	Minsta volym/ analys	Volym per rör	Rör till likvorprov art nr	Rör till blodprov
1	Pneumokock-antigen	eLAB, Mikrobiologiska snabbtest	0,3 mL			
	Glukos					
	Laktat	eLAB, Csv (Likvor)	0,2 mL	1 mL*	25188	Glukoskvot: Fluorid-citratrör, rosakork
	Erytrocyter (vid misstänkt stickblödning)		0,3 mL			
2	Odling+mikroskopi ****	Mikrobiologi	0,7 mL	1 mL	30606	
3	Celler		0,6 mL			
	Albumin, Protein	eLAB, Csv (Likvor)	0,4 mL	1 mL**	25188	
4	Spektrofotometri	eLAB, Csv (Likvor)	1 mL	1 mL**	25188 Ljusskyddas!	Li-heparinrör, ljusgrön kork
Extra	Meningit/encefalit-panel	eLAB, Serologi/Virologi	0,5 mL	1 mL**	30606	
Extra	Neuroborrelia	eLAB, Serologi	0,25 mL/analys	1 mL***	30606	SST-rör, guldgul kork
	Neurosyfilis	Serologi				
Extra	Mykobakterier	eLAB, Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	30606	
Extra	Svampodling		0,5 mL			
	Svamp-DNA (ITS)	Mikrobiologi	0,25 mL	1 mL	30606	
	Cryptokock-antigen		0,25 mL			
Extra	Bakterie-DNA (16S)	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	30606	
Extra	Borrelia-DNA	eLAB, Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	30606	
Extra	Viruspåvisning	eLAB, Serologi/Virologi	0,5 mL	1 mL	30606	För minsta volym se Analysportalen
Extra	Likvor till frysning i biobank, Klinisk mikrobiologi	eLAB, Serologi/Virologi	1 mL	1 mL***	25188	SST-rör, guldgul kork
Extra	IEF Albuminkvot	eLAB, Csv (Likvor)	0,6 mL	1 mL**	25188	SST-rör, guldgulkork
Extra	Aminosyror	eLAB, Kemi, Laboratieremiss, Allmän	0,2 mL	1 mL**	25188	Na-heparinrör, blå kork alt. EDTA microtainer lila kork
Extra	Frysning 2 månader Klinisk kemi, Csv- (Likvor)	Kemi, Laboratieremiss, Allmän	1 mL	1 mL**	25188	
Extra	Alzheimermarkörer (Amyloid b 42 och 40, p T au181, Tau-protein (totalt))	eLAB, Kemi, Laboratieremiss, allmän		2,5 mL	63.614.625 CSF False bottomrör	Fyll Csv-röret upp till markering (ca 2,5 mL) om möjligt.
Extra	Csv-Kappa(fri) index	eLAB, Kemi, Laboratieremiss, allmän	1mL	1mL**	25188	SST-rör, guldgulkork
Extra	Cytologi	Cytologi	1 mL	1 mL	25188	

Extra	Flödescytometri	Patologi- hematopatologi	1 mL	1 mL	Transfixrör TF-CSF-5	
--------------	-----------------	-----------------------------	------	------	-------------------------	--

Resterande material sparas på laboratoriet för eventuellt kompletterande analyser. *1 vecka i kyl, ** 2 månader i frys, *** tillsvidare i frys och **** Vid misstanke om bakteriell meningit överväg att, utöver sterilt rör för odling (art nr 7302), spruta 1 mL likvor i en pediatrik blododlingsflaska. Bifoga remiss Mikrobiologi.