

Labombudsträff

Hösten 2026

Agenda


- Presentation Vårdgivarstöd Laboratoriemedicin
- Provtagning och provhantering
- Packa prov i rörpost och point-to-point (Tempus)
- Packa prov för transport

Vårdgivarstöd Laboratoriemedicin

Ansvarar för

- Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
- Nyheter inom Laboratoriemedicin
- Nyhetsbrev till Labombud
- labmedicin@skane.se

Prenumeration Labombud

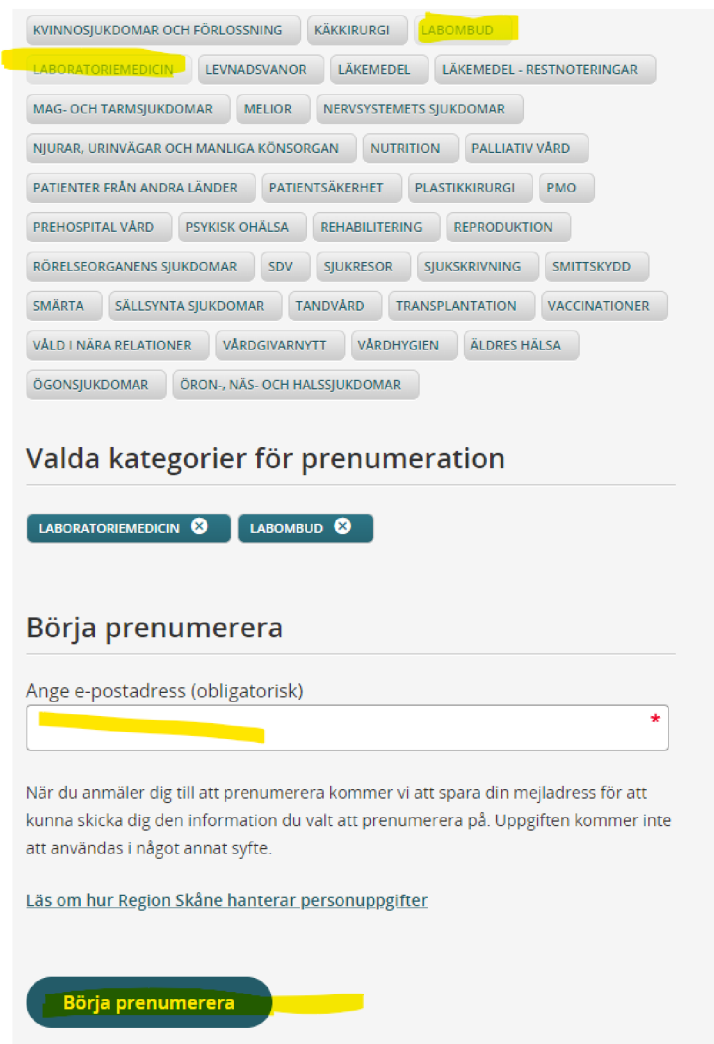

KVINNSJUKDOMAR OCH FÖRLOSSNING KÄKKIRURGI **LABOMBUD**

LABORATORIEMEDICIN LEVNADSVANOR LÄKEMEDEL LÄKEMEDEL - RESTNOTERINGAR

MAG- OCH TARMSJUKDOMAR MELIOR NERVSYSTEMETS SJUKDOMAR

NJURAR, URINVÅGAR OCH MANLIGA KÖNSORGAN NUTRITION PALLIATIV VÅRD

PATIENTER FRÅN ANDRA LÄNDER PATIENTSÄKERHET PLASTIKKIRURGI PMO

PREHOSPITAL VÅRD PSYKISK OHÄLSA REHABILITERING REPRODUKTION

RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR SDV SJUKRESOR SJUKSKRIVNING SMITTSKYDD

SMÄRTA SÄLLSYNTA SJUKDOMAR TANDVÅRD TRANSPLANTATION VACCINATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅRDGIVARNYTT VÅRDHYGIEN ÄLDRES HÄLSA

ÖGONSJUKDOMAR ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR

Valda kategorier för prenumeration

LABORATORIEMEDICIN ✕ LABOMBUD ✕

Börja prenumerera

Ange e-postadress (obligatorisk)

När du anmäler dig till att prenumerera kommer vi att spara din mejladress för att kunna skicka dig den information du valt att prenumerera på. Uppgiften kommer inte att användas i något annat syfte.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Börja prenumerera

Utrensning av epostadresser en gång per år. Måste bekräfta sin epostadress inom 7 dagar.

Om prenumeration slutar komma. Lägg in adress igen eller skriv till labmedicin@skane.se

Länk

[Prenumeration av nyheter, utbildningar och trycksaker - Vårdgivare Skåne](#)

Provtagning och provhantering

Vakuumrör

- Korken på ett vakuumrör får aldrig tas av.
- Provrören innehåller olika tillsatser.
- Provmaterialet i rören får aldrig hällas ihop.
- Följ rörordningen för att undvika felaktiga analysresultat.

Efter provtagning

Vänd/vagga prov direkt efter provtagning så att blodet blandas korrekt med de tillsatser som finns i röret.

Det förhindrar att det bildas koagel eller mikroskopiska proppar som påverkar analysresultatet.

Skaka inte röret. Det kan orsaka hemolys, vilket kan ge felaktiga eller uteblivna analyssvar.

Prov i serumrör (guldgul och röd kork) ska förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter före

• Risk för fibrinbildning
centrifugering, därefter i kyla.

- pipetteringsnålen kan inte suga upp serumet
- manuell hantering
- kan leda till instrumentstopp
- längre svarstid



- Detta leder till längre svarstider

Provtagning för odling

- Bakterier från normalfloran kan påverka resultatet.
 - Sputumprovet ska huvudsakligen bestå av material från nedre luftvägarna och inte av saliv.
 - Sår och abscesshålor rengörs mekaniskt före provtagning.


Prov tas från
övergång



Ange i beställningen om ni misstänker
Brucellos, Tularemi mfl.

Vårt laboratorium är inte godkänt för att hantera dessa
organismer. Om information inte framgår tydligt i
beställningen, finns det risk att laboratoriepersonal smittas
av uppodlat prov.


Läckande formalinburkar

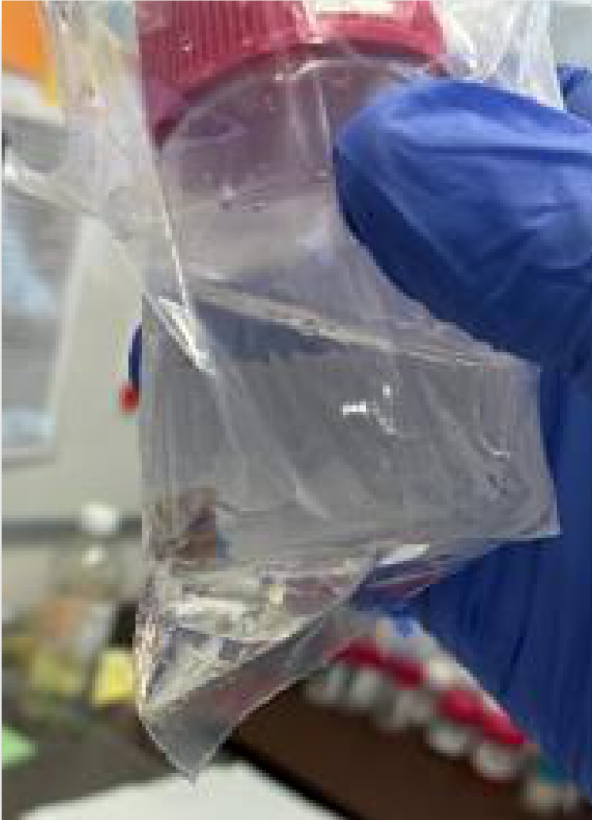

- **Ersättningsburk Biopsafe**
Biopsafeburkarna ska stå upp vid transport eftersom formalinet kan rinna tillbaka upp i korken om burken trillar vilket resulterar i sämre fixering och diagnostisering.
- **Alternativa burkar och burkställ**
Produktkatalogen för vävnadsprovtagning

[Lab - produkter för vävnadsprovtagning](#)

Falskt negativt resultat vid dålig fixering

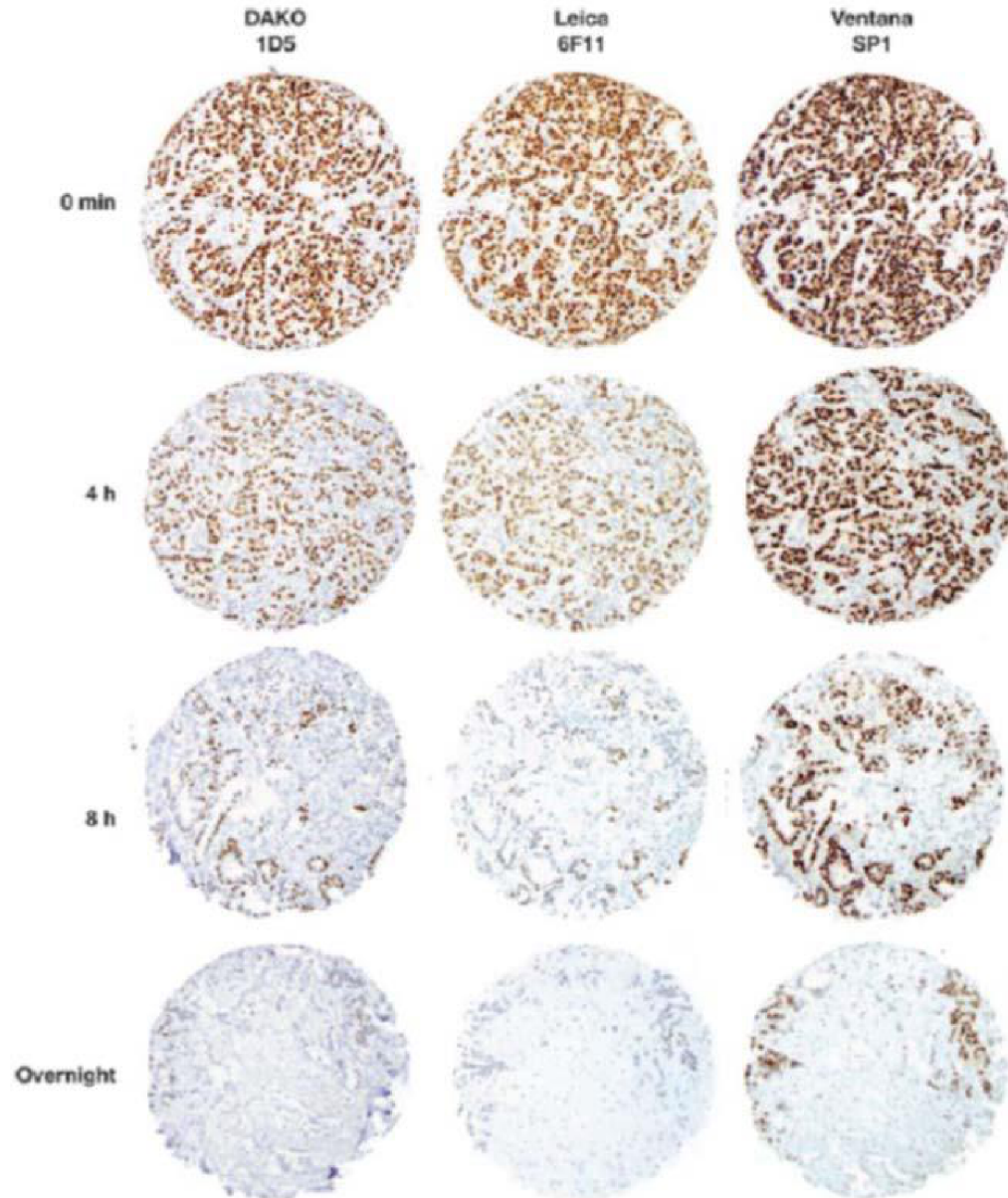

- Vävnad direkt i formalin
- Vävnad i formalin 4 h efter provtagning
- Vävnad i formalin 8 h efter provtagning
- Vävnad i formalin dagen efter provtagningen

Provtagning av prov inför transfusion


- Använd senaste version av remiss.
- Namnunderskrift och namnförtydligande krävs.
- Ej tillåtet att:
 - Faxe ifyllda remisser.
 - Kopiera remiss med ifylld namnunderskrift.
- Använd etikett med tydligt namn och personnummer
 - Vi rekommenderar XXXX

Etiketter Blodgruppering och BAS-test



- Skriv analys och datum på etiketten.
- RSetikett programmet är gratis och kan beställas i Ritz. Konfiguration görs sen i RSetikett konfiguration.

Etiketter eLAB RS

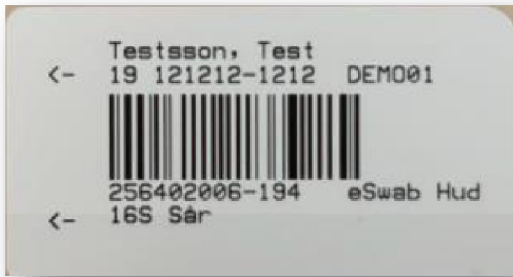

- Etiketten ska vara läsbar.
- Etiketten placeras horisontellt och i ovankant på röret.

Använd endast upphandlade etiketter:

- Etikett Lab/provtagning bordsskrivare Zebra 52x28mm 2358 etiketter/rulle.
Artikelnummer Marknadsplatsen: 31659.
Artikelnummer Onemed: 1156136.
- Etikett Lab/provtagning bärbar skrivare Zebra 52x28mm 590 etiketter/rulle.
Artikelnummer i Marknadsplatsen: 31660.

Privata vårdgivare som inte når Marknadsplatsen beställer via OneMeds Webshop. Vid frågor kontakta OneMeds kundsupport.

OneMeds kundsupport

Packa prov i rörpost och point-to-point (Tempus)

Packningsinstruktion - Patron utan insats

- Prov och remiss packas tillsammans i avsedd plastficka.
- Rulla ihop till smalt paket. Håll ihop med gummiband.
- Kapillärrör packas i transporthylsa.
- Patronen töms automatiskt. Om prov/remiss fastnar i patronen åker de med tillbaka.



Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)

Packningsinstruktion – Patron med insats



- Prov beställda i eLAB RS skickas i patron med insats. LU röd patron och övriga orter gul patron.
- Blododlingar som är beställda i eLAB RS skickas med gul patron i Malmö.



Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)

Rörpostpatron med insats eller point to point

Endast provrör med rund botten får skickas



Dessa rör får inte skickas i point to point eller rörpostpatron med insats:

- Rör med flat botten
- Quantiferonrör
- Udda vätskor (pleura, ascites, bukdrän mm)
- Kapillära prov och blodgas-sprutor
- Rör över 16 mm i diameter


NEJ!



Rörpostpatron med insats eller point to point

När felaktiga prov skickas med point to point eller rörpostpatron med insats kommer det orsaka stop i automationen →

Vilket gör att det blir försenade provsvar för alla beställare.

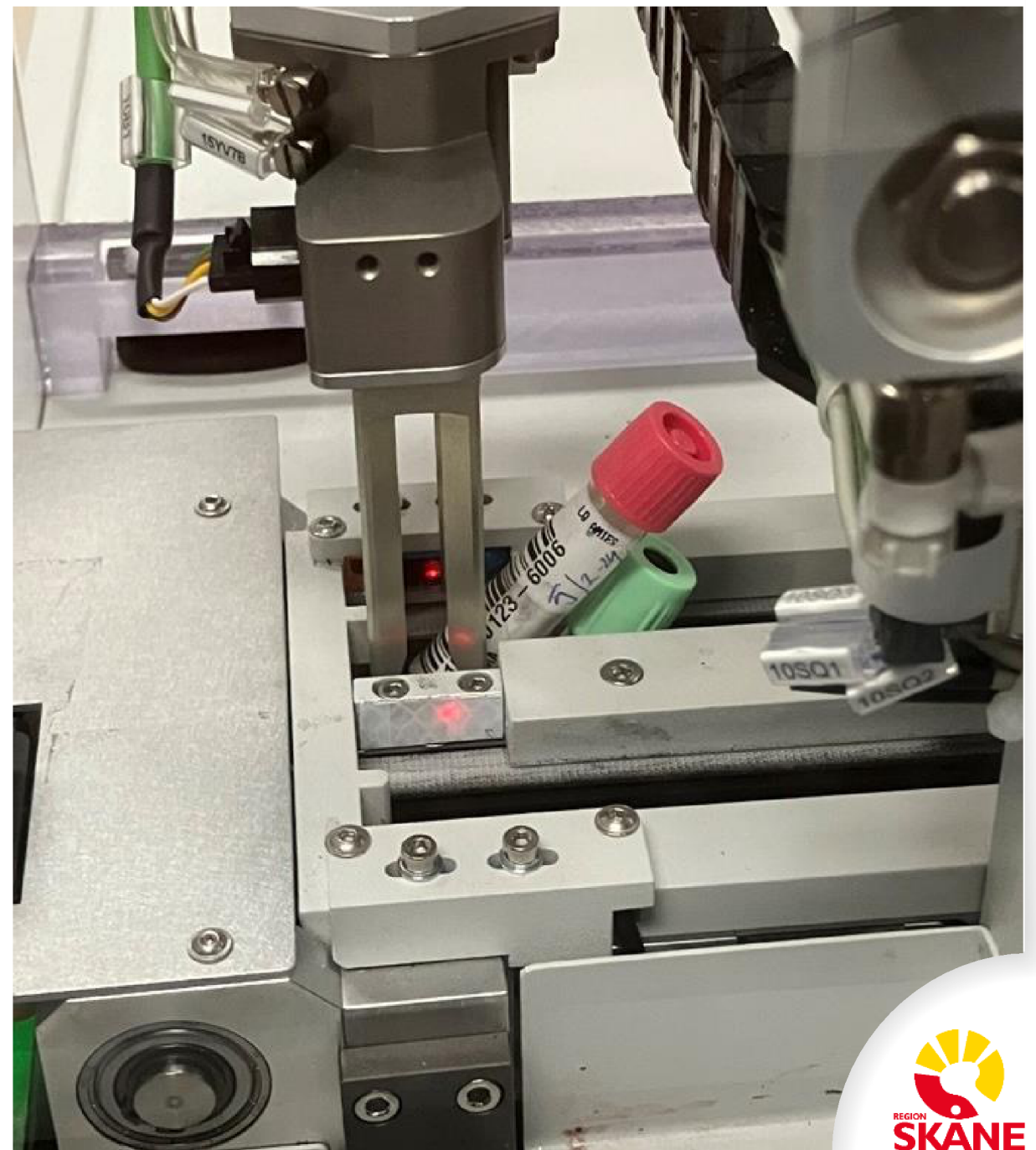

Packningsinstruktion – Blå patron



- Blå patron endast för blodprodukter.
- Tom patron returneras omedelbart.
- Patron med returprodukter returneras adresserade till transfusionsmedicin.
- Blodprodukter som är kopplade med aggregat eller är trasiga får ej skickas i rörpost.

Läs mer

[Transport av laboratorieprover - Vårdgivare Skåne](#)


Kom gärna och besök Laboratoriemedicin

Skriv till labmedicin@skane.se och önska studiebesök.



Mer information

- [Laboratoriemedicin - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/laboratoriemedicin-vardgivare)
- [Labhandboken](#)
- Preamalytik [Lärportalen \(skane.se\)](https://www.skane.se/larportalen)
- [eLAB Vårdgivare Skåne](#)
- labmedicin@skane.se
- [AnalysPortalen - Labmedicin Skåne](#)

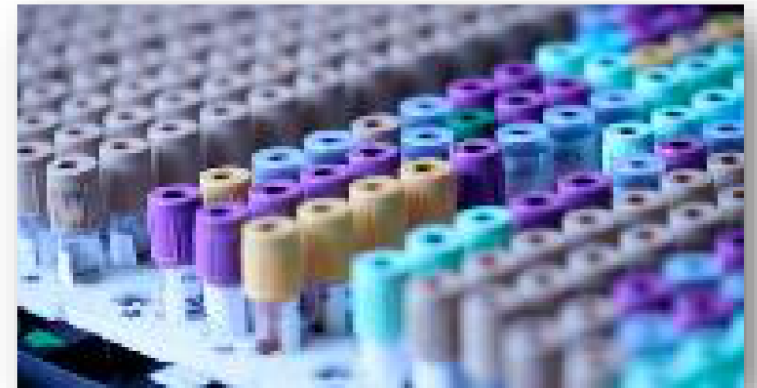

Tack för idag!

labmedicin@skane.se