

Labombudsträff

Hösten 2026

Agenda


- Presentation Vårdgivarstöd Laboratoriemedicin
- Provtagning och provhantering
- Packa prov i rörpost och point-to-point (Tempus)
- Packa prov för transport

Vårdgivarstöd Laboratoriemedicin

Ansvarar för

- Vårdgivare Skåne/Laboratoriemedicin
- Nyheter inom Laboratoriemedicin
- Nyhetsbrev till Labombud
- labmedicin@skane.se

Prenumeration Labombud

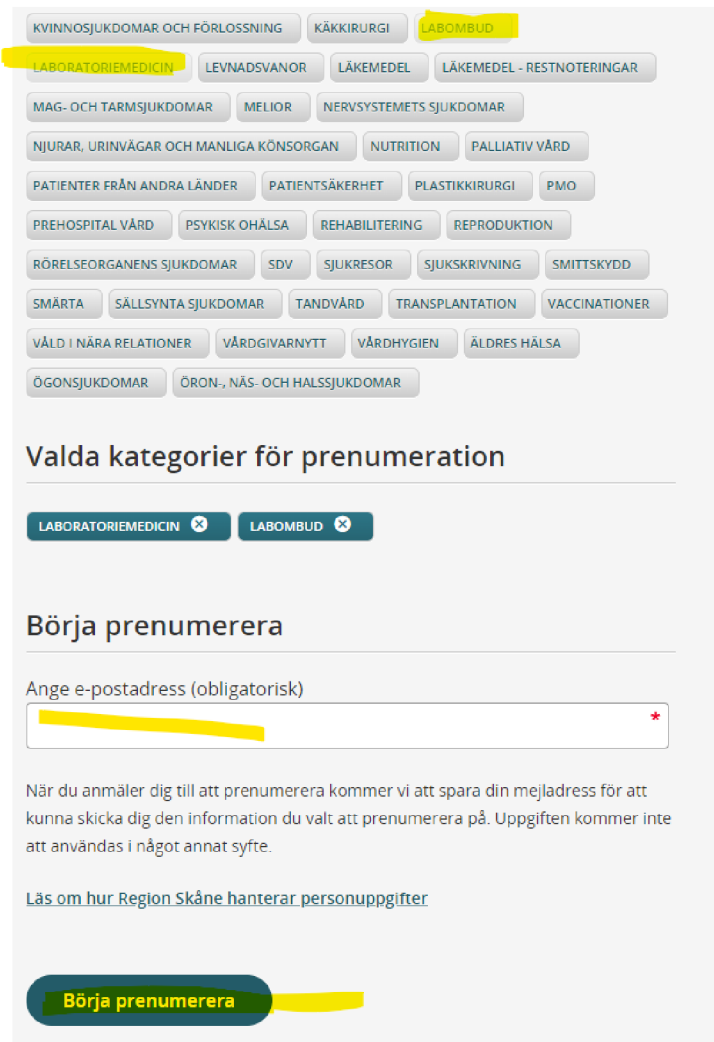

KVINNSJUKDOMAR OCH FÖRLOSSNING KÄKKIRURGI **LABOMBUD**

LABORATORIEMEDICIN LEVNADSVANOR LÄKEMEDEL LÄKEMEDEL - RESTNOTERINGAR

MAG- OCH TARMSJUKDOMAR MELIOR NERVSYSTEMETS SJUKDOMAR

NJURAR, URINVÅGAR OCH MANLIGA KÖNSORGAN NUTRITION PALLIATIV VÅRD

PATIENTER FRÅN ANDRA LÄNDER PATIENTSÄKERHET PLASTIKKIRURGI PMO

PREHOSPITAL VÅRD PSYKISK OHÄLSA REHABILITERING REPRODUKTION

RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR SDV SJUKRESOR SJUKSKRIVNING SMITTSKYDD

SMÄRTA SÄLLSYNTA SJUKDOMAR TANDVÅRD TRANSPLANTATION VACCINATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅRDGIVARNYTT VÅRDHYGIEN ÄLDRES HÄLSA

ÖGONSJUKDOMAR ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR

Valda kategorier för prenumeration

LABORATORIEMEDICIN ✕ LABOMBUD ✕

Börja prenumerera

Ange e-postadress (obligatorisk)

När du anmäler dig till att prenumerera kommer vi att spara din mejladress för att kunna skicka dig den information du valt att prenumerera på. Uppgiften kommer inte att användas i något annat syfte.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Börja prenumerera

Utrensning av epostadresser en gång per år. Måste bekräfta sin epostadress inom 7 dagar.

Om prenumeration slutar komma. Lägg in adress igen eller skriv till labmedicin@skane.se

Länk

[Prenumeration av nyheter, utbildningar och trycksaker - Vårdgivare Skåne](#)

Provtagning och provhantering

Vakuumrör

- Korken på ett vakuumrör får aldrig tas av.
- Provrören innehåller olika tillsatser.
- Provmaterialet i rören får aldrig hällas ihop.
- Följ rörordningen för att undvika felaktiga analysresultat.

Efter provtagning

Vänd/vagga prov direkt efter provtagning så att blodet blandas korrekt med de tillsatser som finns i röret.

Det förhindrar att det bildas koagel eller mikroskopiska proppar som påverkar analysresultatet.

Skaka inte röret. Det kan orsaka hemolys, vilket kan ge felaktiga eller uteblivna analyssvar.

Prov i serumrör (guldgul och röd kork) ska förvaras i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering, därefter i kyla.

- Risk för fibrinbildning
 - pipetteringsnålen kan inte suga upp serumet
 - manuell hantering
 - kan leda till instrumentstopp
 - längre svarstid



Provtagning för odling

- Bakterier från normalfloran kan påverka resultatet.
 - Sputumprovet ska huvudsakligen bestå av material från nedre luftvägarna och inte av saliv.
 - Sår och abscesshålor rengörs mekaniskt före provtagning. Prov tas från ett område med aktiv inflammation, lämpligen vid övergång




Ange i beställningen om ni misstänker
Brucellos, Tularemi mfl.

Vårt laboratorium är inte godkänt för att hantera dessa
organismer. Om information inte framgår tydligt i
beställningen, finns det risk att laboratoriepersonal smittas
av uppodlat prov.

Laboratoriesmitta - Riskklass 3-bakterier och svampar (tex Brucella spp. och
Francisella tularensis)


Läckande formalinburkar

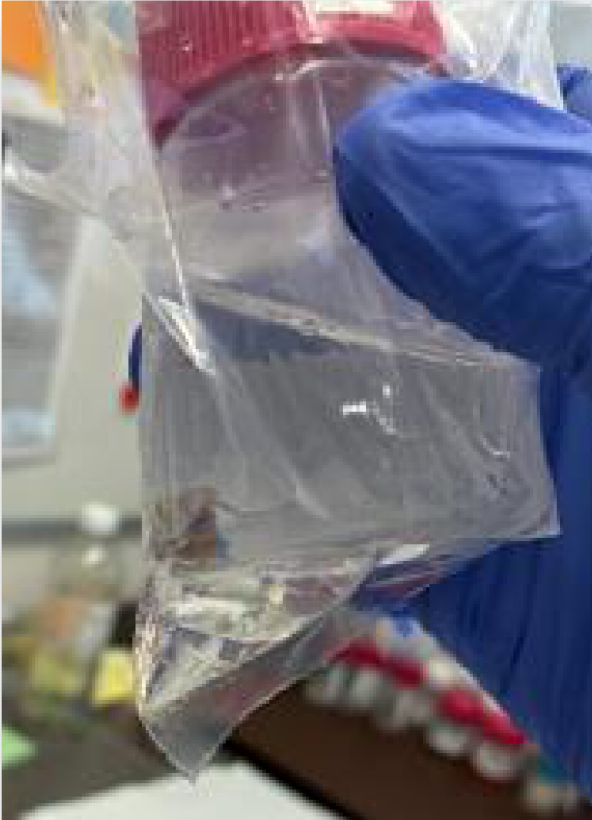

- **Ersättningsburk Biopsafe**
Biopsafeburkarna ska stå upp vid transport eftersom formalinet kan rinna tillbaka upp i korken om burken trillar vilket resulterar i sämre fixering och diagnostisering.
- **Alternativa burkar och burkställ**
Produktkatalogen för vävnadsprovtagning

[Lab - produkter för vävnadsprovtagning](#)

Slutresultat vid dålig fixering

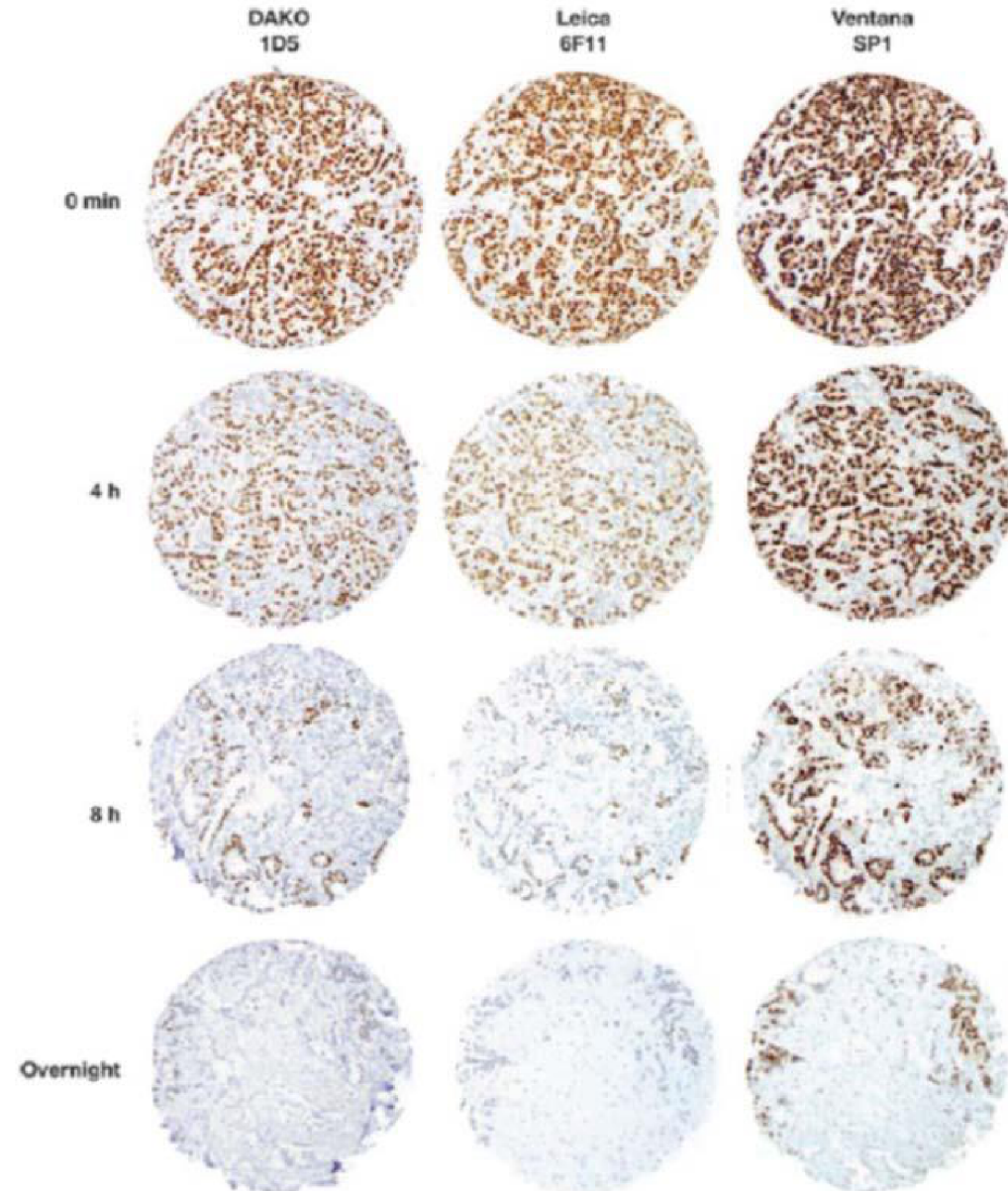

Falskt negativt resultat dåligt fixerat vävnadsprov.

- Vävnad direkt i formalin
- Vävnad i formalin 4 h efter provtagning
- Vävnad i formalin 8 h efter provtagning
- Vävnad i formalin dagen efter provtagningen

Provtagning av prov inför transfusion


- Använd senaste version av remiss.
- Namnunderskrift och namnförtydligande krävs.
- Ej tillåtet att:
 - Faxe ifyllda remisser.
 - Kopiera remiss med ifylld namnunderskrift.
- Använd etikett med tydligt namn och personnummer
 - Vi rekommenderar XXXX

Etiketter Blodgruppering och BAS-test



- Skriv analys och datum på etiketten.
- RSetikett programmet är gratis och kan beställas i Ritz. Konfiguration görs sen i RSetikett konfiguration.

Etiketter eLAB RS

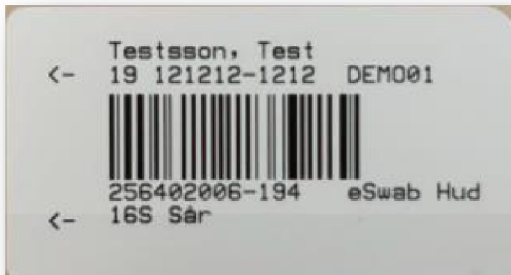

- Etiketten ska vara läsbar.
- Etiketten placeras horisontellt och i ovankant på röret.

Använd endast upphandlade etiketter:

- Etikett Lab/provtagning bordsskrivare Zebra 52x28mm 2358 etiketter/rulle.
Artikelnummer Marknadsplatsen: 31659.
Artikelnummer Onemed: 1156136.
- Etikett Lab/provtagning bärbar skrivare Zebra 52x28mm 590 etiketter/rulle.
Artikelnummer i Marknadsplatsen: 31660.

Privata vårdgivare som inte når Marknadsplatsen beställer via OneMeds Webshop. Vid frågor kontakta OneMeds kundsupport.

OneMeds kundsupport

Packa prov för transport från primärvården

Prov till Transfusionsmedicin och transplantation

Alla prover till transfusionsmedicin och transplantation ska packas separat.

Om enstaka prov - i transporthylsa och i ett vadderat kuvert.

Om flera prover - i transportburk och i en ytterförpackning.

Remiss ska alltid skickas ihop med prov.

Märk ytterförpackning med Transfusionsmedicin/KIT samt ort till närmsta akutsjukhus.

Packningsinstruktion Turkos låda



Lådställning 1

Närmsta akutsjukhus

- Digitala beställningar: eLAB RS enligt tabell.
- Beställningar på pappersremiss: Rutin/akut, Special 3, Special Malmö, samt det som skickas till externa lab.
- **Adressvred:** Välj 1 och närmsta akutsjukhus (HG, KD, LU, MA).

Lådställning 2

Laboratoriemedicin Lund

- Övriga digitala beställningar som inte står i tabell samt övriga beställningar på pappersremisser.
- **Adressvred:** Välj 2 och Lund (LU).

Tänk på:



- Beställ i första hand i eLAB RS.
- Transportlådan ska alltid innehålla 4 lådinsatser som går att vända. Ena sidan för rör, andra sidan för övriga provbehållare.
- Rör och burkar som inte passar i insatsen packas som Enstaka prov.
- Kapillära prover packas i transporthylsa i lådinsatsen.
- Ingen aluminiumfolie eller gummiband runt rören.

Läs mer

[Transport av prover utanför sjukhusområdet](#)


Kom gärna och besök Laboratoriemedicin

Skriv till labmedicin@skane.se och önska studiebesök.



Mer information

- [Laboratoriemedicin - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/laboratoriemedicin)
- [Labhandboken](#)
- Preamalytik [Lärportalen \(skane.se\)](https://www.skane.se/larportalen)
- [eLAB Vårdgivare Skåne](#)
- labmedicin@skane.se
- [AnalysPortalen - Labmedicin Skåne](#)

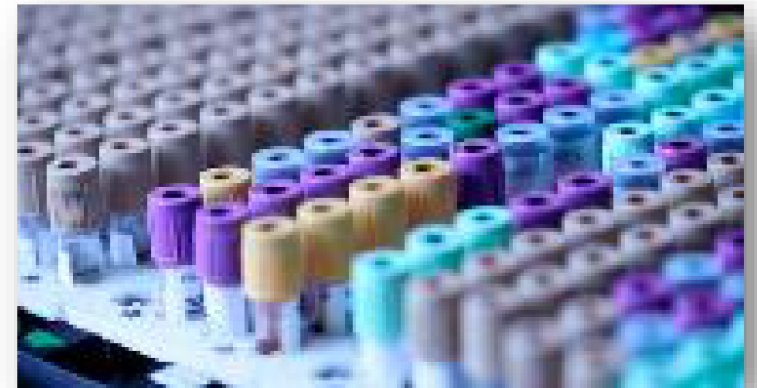

Tack för idag!

labmedicin@skane.se